

## TRA 03



Coloris :		Code article :	Code GTIN :
Argent		<b>1060027</b>	3615800007745
Champagne		<b>1060030</b>	3615800008001

**Famille :**  
**Aides à la marche**

**Description :**  
**Déambulateur 4 roues dont 2 à frein, pliant, avec siège, appui dos, et poignées ergonomiques réglables en hauteur. Entièrement pliable pour le transport**

**Usage revendiqué :**  
Aide à la marche manipulée avec les 2 bras pour personnes à mobilité réduite.  
Usage intérieur ou extérieur.

**Classe du dispositif :** I (non - invasif)

**Garantie produit :**  
2 ans contre tout vice de fabrication


**Code identification individuelle LPPR :** 6259236  
(Déambulateurs, à l'achat, Vilgo)



### Caractéristiques Techniques

#### Dimensions (mm)

- Largeur déplié : 670 mm
- Longueur : 714 mm
- Hauteur sol poignée (mini/maxi) : 815 / 940 mm
- Hauteur sol / siège : 570 mm
- Siège : 460 x 250

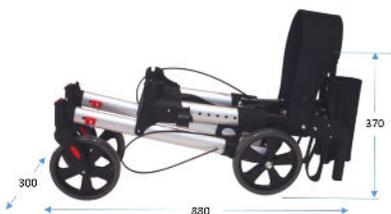

#### Description technique

- Châssis tubulaire elliptique en aluminium finition époxy
- Crosses aluminium réglables en hauteur par cliquet (6 positions) finition époxy
- Poignées ergonomiques
- Siège et appui dos toile nylon
- Shopping bag amovible
- Freins de parking et de service sur roues arrière
- Roues arrière fixes à bandage : Ø 200 x 30 mm
- Roues avant pivotantes : Ø 200 x 30 mm – blocage directionnel – démontables pour transport.
- Châssis pliant

- Livré avec porte canne

Poids du produit :

**7,3 kg**

Date de 1ère mise sur le marché :

**19/03/2020**

### Etiquetage produit

Vignette CE

